
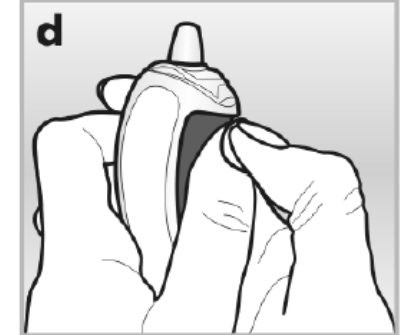
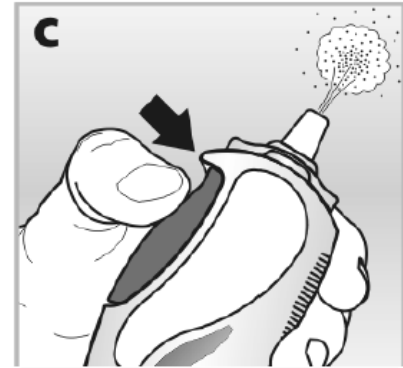


六項您需要知道有關艾敏釋 (Avamys) 鼻噴劑的重要事項

1. 本鼻噴劑內有一棕色玻璃瓶。要檢查還剩下多少藥物，請垂直拿着鼻噴劑背向光源，您便可透過窗格察看剩餘藥物的液體水平。
2. 當首次使用鼻噴劑時，您必須蓋回塵蓋，並將鼻噴劑用力搖勻大約十秒鐘。這個步驟非常重要，是因為艾敏釋 (Avamys) 鼻噴劑非常黏稠，只有用力搖勻後才會液化 (圖 b)，繼而能夠被噴灑出來。
3. 接著，緊實地按壓瓶邊的按鈕，噴霧便會從噴嘴釋放 (圖 c)。
4. 如果按鈕難以僅用拇指按壓，您可以使用雙手 (圖 d)。
5. 不使用鼻噴劑時，請蓋回塵蓋。塵蓋可以防塵、保持瓶內的壓力，並防止噴嘴堵塞。當塵蓋緊蓋時，可防止瓶邊的按鈕意外被按下。
6. 請勿使用別針或任何利器來清理噴嘴，因為會損壞鼻噴劑。

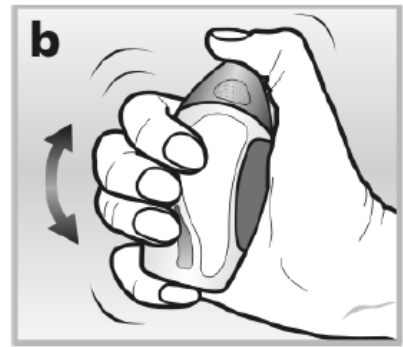

如何準備鼻噴劑



以下情況您必須進行準備鼻噴劑程序：

- 首次使用鼻噴劑前
- 塵蓋曾經沒有被蓋回

鼻噴劑的準備程序能確保您每次都能得到完整的藥物劑量。



請依下列步驟：

- 蓋回塵蓋，並將鼻噴劑用力搖勻大約十秒鐘。
- 用拇指和食指輕輕按壓塵蓋兩邊，直立取下塵蓋 (圖 e)。
- 垂直拿着鼻噴劑，並把噴嘴向外。
- 緊實地按壓按鈕，並重覆至少 6 次直到空中出現一團微細的噴霧 (圖 f)。
- 現在您可以隨時使用鼻噴劑。

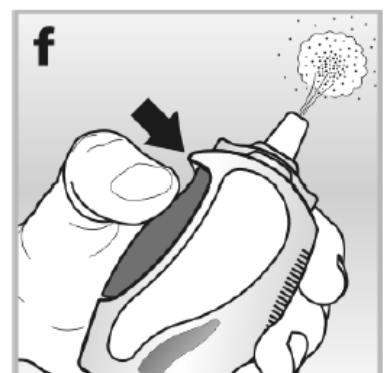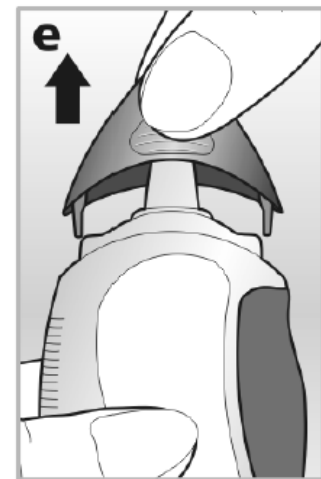

如何使用鼻噴劑

1. 用力搖勻鼻噴劑。
2. 取下塵蓋。
3. 擤清鼻孔，然後頭稍微向前傾。
4. 垂直拿着鼻噴劑，將噴嘴小心地放進其中一邊鼻孔(圖 g)。
5. 將噴嘴末端稍微向外，離開鼻樑中間。這有助藥物達到鼻孔內正確部位。
6. 用鼻吸氣時，請緊實地按壓一次按鈕 (圖 h)。
7. 小心不要讓藥物噴進眼睛。如果發生這種情況，請用清水沖洗眼睛。
8. 移出噴嘴，並用口呼氣。
9. 如果您的醫生告訴您，每邊鼻孔必須噴 2 次的話，重覆步驟 4 至 6。
10. 噴藥於另一邊鼻孔時，亦請重覆步驟 4 至 6。
11. 把塵蓋蓋回鼻噴劑。

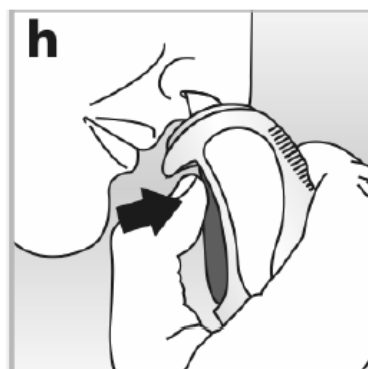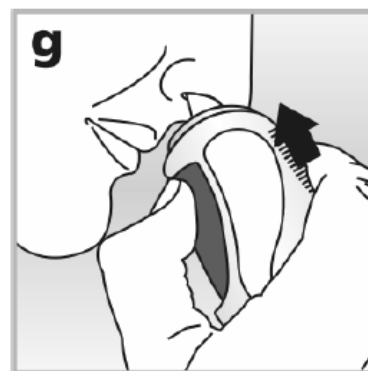

如何清潔鼻噴劑

每次使用完畢：

- 請用乾淨的乾紙巾來擦拭噴嘴和塵蓋內面 (圖 i 及 j)。請勿用水來清潔。
- 請勿使用別針或任何利器在噴嘴上。
- 清潔完畢請立即蓋回塵蓋，可以防塵、保持瓶內的壓力，並防止噴嘴堵塞。

如果鼻噴劑看似未能正常運作：

- 透過窗格內的液體水平檢查是否仍有剩餘藥物。如果水平太低，剩餘藥物可能不足以讓鼻噴劑正常運作。
- 檢查鼻噴劑是否有損壞。
- 如果您認為噴嘴可能被堵塞，請勿使用別針或任何利器來清潔。
- 嘗試依「如何準備鼻噴劑」的指示來重新備妥鼻噴劑。
- 如果鼻噴劑仍然不能正常運作，或所釋放的並非微細噴霧 (如射出液體)，又或使用鼻噴劑時感到任何不適，請把鼻噴劑退回給您的藥師。

